

Pluspunten TheraMon® voor behandelend arts:

- Verhoogt de motivatie van de patiënt
- Verhoogt de coöperatie
- Confronterend overzichtelijk voor de patiënt en ouder(s)/verzorger(s)
- Duidelijke dossiervorming
- Betere voorspelbaarheid van de behandeling
- Kan de therapieduur verkorten
- Kan de kosten van de behandeling zo reduceren
- Kan ondersteunen bij de toepassing van taakdelegatie
- Het documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur staat op de prestatielijst van de NZa
- De prestatie 'elektronische chip' is eenmalig gedurende de gehele actieve behandelduur in rekening te brengen

Meer informatie?


info@orthosmart.nl

www.orthosmart.nl

orthosmart
Leverancier van TheraMon®

TheraMon®

Haal samen met de patiënt het maximale uit de behandeling

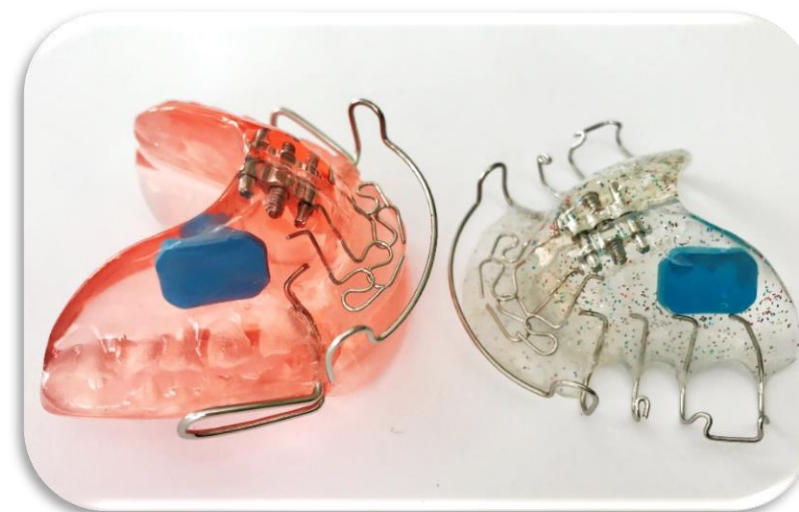

Gecontroleerde weg naar een stralende lach

Ja, ik wil samen met mijn patiënt werken aan een goede behandeling!

Elke behandelaar weet dat het succes van het orthodontisch resultaat samenhangt met de motivatie van de patiënt. Het echt dragen van de beugel is hiervoor van essentieel belang. Laat dit nou vaak een knelpunt zijn als het gaat om uitneembare apparatuur. Gelukkig kan nu met het TheraMon® systeem, samen met de patiënt, aan het behalen van een optimale draagtijd worden gewerkt.



Hoe werkt het TheraMon® systeem?

In vrijwel elke uitneembare apparatuur kan in de kunststof basis een TheraMon® chip geplaatst worden door uw laboratorium. Samen met de patiënt en zijn ouder(s)/verzorger(s) wordt afgesproken wat de optimale draagtijd is. Deze wordt in de TheraMon® software vastgelegd.

Zodra een patiënt begint met het dragen van de beugel waarin de TheraMon® chip zit, registreert deze de draaguren.

Bij de eerstvolgende controle leest u de TheraMon® chip uit en kunt u samen met de patiënt en zijn ouder(s)/verzorger(s) zien of aan de optimale draagtijd is voldaan. In een duidelijk overzicht ziet u het aantal uren per dag en het totaal gemiddelde, gemeten ten opzichte van het aantal gewenste draaguren.

Het inzicht stimuleert de betrokkenheid bij de behandeling, werkt motivatie verhogend en voorkomt onnodige discussies over het wel of niet gedragen hebben van de beugel. Maar dat niet alleen, ook verkrijgt u een goed inzicht om de behandeling in combinatie met de draagduur voort te zetten of bij te stellen.


Waar bestaat het TheraMon® systeem uit?

Een beugel waarin de **TheraMon® chip** is geplaatst. De TheraMon® microsensoren zijn speciaal ontwikkeld voor de toepassing in alle uitneembare apparatuur binnen de orthodontie.



Uw laboratorium plaatst de chip in de kunststof basis van de beugel. Op deze wijze kan er geen contact met het speeksel optreden. De TheraMon® chip geeft geen enkel signaal of straling af. De chip slaat enkel en alleen de draaggegevens op.

Een **TheraMon® pen reader**, waarmee de behandelaar de TheraMon® chip kan uitlezen als de chip zich binnen het magnetisch veld van de reader bevindt. De reader is aangesloten via een standaard USB aansluiting op het werkstation of netwerk. Maar kan ook via bluetooth connectie maken.

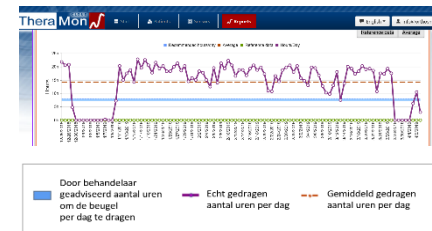

De **TheraMon® software**, geïnstalleerd op een Windows computer waarmee de uitgelezen data vertaald en zichtbaar wordt gemaakt in een helder diagram.

Zo is in een oogopslag het daadwerkelijk aantal draaguren ten opzichte van de gewenste draagtijd te zien.